

Противопоказания

Осцилляционная терапия с Эргофлекс Комфорт противопоказана:

- лицам, имеющим постоянный кардиостимулятор, при остром тромбозе;
- лицам, после трансплантации органов, при наличии сепсиса (заражение крови);
- во время беременности (рекомендация: после беременности весьма желательно);
- при тяжелых кровотечениях (рекомендация: во время менструации применение терапии весьма желательно);

Функция программы осцилляционной терапии - (OP). кнопка 16

Нажмите кнопку (OP) для активации лечебных программ, которые могут помочь при ниже указанных заболеваниях.

OP1

Нажмите кнопку (OP) - 1 раз – при проблемах в шейной и грудной области позвоночника, для снятия мышечного напряжения и уплотнения мышц, при головной боли и при мигрени.

OP2

Нажмите кнопку (OP) - 2 раза – при отёчности, при скоплении жидкости в организме, для снижения веса, для активации лимфатической системы, для лечения гидролипидистрофии (целлюлит), при нарушении кровообращения.

OP3

OP3. Нажмите кнопку (OP) - 3 раза – при болях в области седалищного нерва, при проблемах в области поясничного отдела позвоночника, при люмбаго, при заболевании позвоночного столба и позвоночных дисков.







OP4

Нажмите кнопку (OP) - 4 раза – при артрите, остеоартрите, ревматических заболеваниях, при болях в суставах, остеопорозе, при стимулировании обмена веществ.

OP5

Нажмите кнопку (OP) - 5 раз – при тяжелых физических нагрузках, используется для регенерации мышечной боли, для вывода из организма продуктов обмена веществ

пример настройки

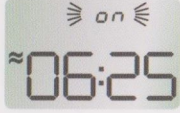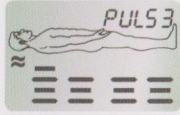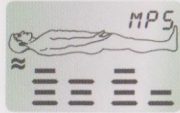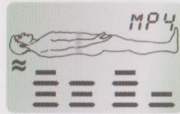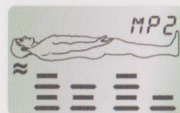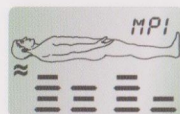

Функции программы оздоровительного массажа. кнопка 12

P 1

Нажмите на кнопку (P) - 1 раз – для глубокого расслабления и отдыха после физических напряжений;

P 2

Нажмите кнопку (P) - 2 раза – для удаления из организма продуктов обмена веществ, шлаков и токсических веществ;

P 3

Нажмите кнопку (P) – 3 раза – для расслабления мышц, при нарушении сна, для восстановления сил;

P 4

Нажмите на кнопку (P) - 4 раза – для энергетической и релаксационной программы. Оказывает поддерживающее воздействие на работоспособность, поддерживает общий процесс регенерации и хорошего самочувствия, очень хорошо стимулирует работу лимфотокков.


P 5

Нажмите кнопку (P) - 5 раз – при депрессивных симптомах, общего недомогания, болезненного напряжения.

Функция источника тепла. Кнопка 13

Нажмите кнопку источника тепла (W) в положение ВКЛ. - или ВЫКЛ. (включить или выключить). Это может обеспечить дополнительное облегчение при болях в спине и напряжённости мышц. Трёхступенчатый температурный режим регулируется посредством многократного нажима. В качестве альтернативы возможно посредством переключения сюда, отдельно продаваемого пояса, переключиться. **Внимание!** Здесь применяется только пояс или только матрас.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

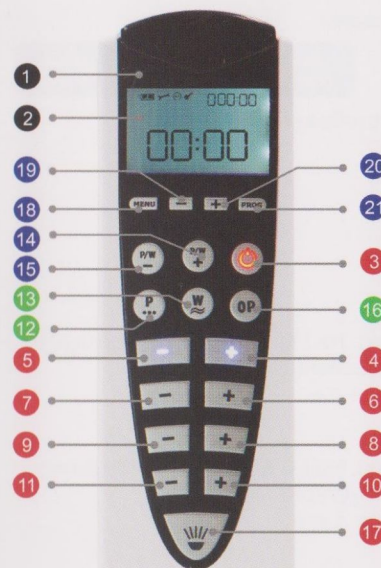

star-medico®
Ihrer Gesundheit zuliebe *****

Made in Germany

Hotline: 071 73 / 91 39 77
www.star-medico.com

- 1 Приёмочный светодиодный индикатор
- 2 LC-Display (ЖК-дисплей)
- 3 «Массаж» вкл. / выкл.
- 4 5 Массажная модуль «верхняя часть спины» включить / увеличение интенсивности (5) снижение интенсивности / выключить
- 6 7 Массажная модуль «нижняя часть спины» (6) включить / увеличение интенсивности (7) снижение интенсивности / выключить
- 8 9 Массажная модуль область таза и бёдер (8) включить / увеличение интенсивности (9) снижение интенсивности / выключить
- 10 11 Массажная модуль «нижняя часть ног. ступни» (10) включить / увеличение интенсивности (11) снижение интенсивности / выключить
- 12 Оздоровительно – массажные программы 5 различных программ
- 13 Тепловой источник. Трёхступенчатый температурный режим регулируется многократным нажатием
- 14 15 Уровень скорости оздоровительного массажа (14) скорость увеличить (15) скорость снизить
- 16 Осцилляционные программы 5 лечебных программ
- 17 Источник света вкл. / выкл.
- 19 Таймер « - » устанавливает продолжительность массажа на 15 минут (базовая настройка)
- 20 Таймер « + » устанавливает продолжительность массажа на 30 минут

Кнопки для программируемых функций:

- 18 Кнопка – MENU (Menu) запуск режима программирования
- 19 Кнопка « - » меняет показатель вниз
- 20 Кнопка « + » меняет показатель вверх
- 21 Кнопка PROG (ПРОГРАММА) переходит на следующий регулируемый показатель или завершает режим программирования

МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ЗДОРОВЫЙ СОН С ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ МАССАЖЕМ*****

Программируемые функции


Нижеследующие функции могут быть запрограммированы:

- Время
- Сигнализация (звуковой сигнал)




Для программирования используются только наверху отобразённые кнопки


Настройка времени

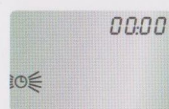


- Нажмите кнопку **MENU** (меню). На LC-Display (ЖК-дисплей) внизу слева мигает символ «часы»

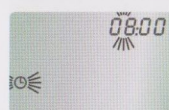

- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На LC-Display (ЖК-дисплей) мигают символ «часы» и цифры часового табло.
- нажимая на часовом табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.

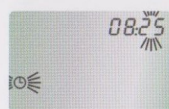


- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На LC-Display (ЖК-дисплей) мигают символ «часы» и цифры минутного табло
- нажимая на минутном табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.

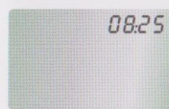


- Нажмите кнопку **PROG** (программа)

Данные фиксируются и на дисплее высвечивается установленное время, символ «часы» исчезает.


Отключение сигнализации

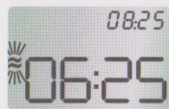

- Нажмите кнопку **MENU** (меню) и потом **1 раз** кнопку **+**.
- На дисплее по середине слева мигает символ «массаж»

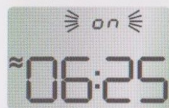


- Нажмите кнопку **PROG** (программа)
- на дисплее высвечивается **ON** (звуковой сигнал включён). Выключите сигнализацию кнопкой **OFF** (звуковой сигнал выключен).

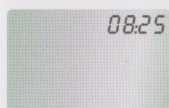


- Нажмите кнопку **PROG** (программа). Данные фиксируются и на дисплее опять высвечивается текущее время, символ «массаж» исчезает.

Продукция классифицируется по германскому промышленному стандарту надёжности электрических приборов для домашнего употребления EN 60335-1. Применение предписанных стандартов гарантирует соблюдение директивы ЕС по низковольтному оборудованию и электромагнитную совместимость приборов. Соблюдение этих стандартов подтверждено маркировкой «СЕ». Кроме того, наша продукция подвергается регулярному контролю. До сих пор никаких отрицательных взаимодействий с медикаментами не наблюдалось.


Программировать звуковой сигнал (датчик времени)

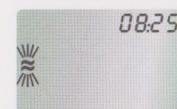


- Нажмите кнопку **MENU** (меню) и потом **1 раз** кнопку **+**. На дисплее мигает символ «массаж».

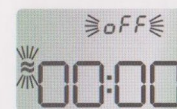


- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На дисплее мигает символ «массаж», сообщение OFF (звуковой сигнал выключен) и цифры массажного датчика времени.

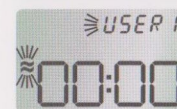


- Включите звуковую функцию кнопкой **+** на ON (звуковой сигнал включён).
- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На дисплее мигает символ «массаж» и массажные программы на выбор.

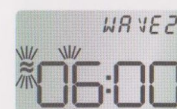


- Воспользуйтесь кнопками **+** и **-** для установки предпочитаемой Вами массажной программы (User 1, Wave 1, Wave 2, Wave 3, Puls 1, Puls 2 или Puls 3).

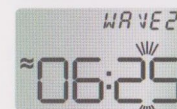

- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На дисплее мигают символ «массаж» и цифры часового табло.
- нажимая на часовом табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.

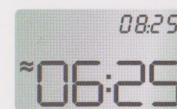

- Нажмите кнопку **PROG** (программа). На дисплее мигают символ «массаж» и цифры минутного табло.
- нажимая на минутном табло кнопки **+** и **-** настраивайте желаемое время.

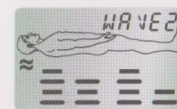

- Нажмите кнопку **PROG** (программа). Данные фиксируются и на дисплее высвечивается текущее время, время звукового сигнала и символ «массаж».

Когда запрограммированное время звукового сигнала подойдёт, включается заданная Вами массажная программа. Программа длится 8 минут, затем она автоматически отключается. Во время массажной программы на дисплее высвечивается символ «массаж». Массажный процесс можно приостановить кнопкой **17**. Примерно через 5 минут массажная программа вновь включается (Snooze-Funktion). Чтобы полностью отключить звуковую функцию, нажми кнопку **3**. Звуковая функция активируется на следующий день в заданное время.

Следуйте за нами: „starmedico“

